

Disk, çocuk bebek arabası veya benzeri durumlar için farklı konumlara yerleştirilebilir..

**Temizleme:** Yumuşak bant 40°C veya daha düşük sıcaklıkta elle yıkanabilir. Su geçirmez olmadığı için ses işlemcisinin asla yıkanmaması gerektiğini unutmayın! Lütfen yıkamadan önce iletişim cihazının yumuşak banttan çıkarıldığından emin olun.

**Yeni kafa bantı için:** Çocuğunuzun kafası büyüdükçe, yeni bir kafa bandı sipariş edilmesi gerekebilir. Bu durumda, yeni bir kafa bandı sipariş etmek için lütfen 020 3224 4667'den çocuğunuzun kafa ölçüleri ile bizi arayayınız.

[Patient advice and liaison service \(PALS\)-Hasta Tavsiye ve İrtibat servisi](#)

Eğer övgü ve şikayetiniz veya endişeniz var ise lütfen 020 7288 5551'li telefonu arayarak veya [whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net](mailto:whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net) internet adresine E-posta göndererek PALS servisimiz ile iletişime geçiniz

Eğer bu broşürün büyük baskılı, sesli veya tercüme edilmiş kopyasına ihtiyacınız varsa, lütfen 020 7288 3182 numaralı telefonumuzu arayınız. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden geleni yapacağız.

**Whittington Health NHS Trust**  
Magdala Avenue  
London  
N19 5NF  
Phone: 020 7272 3070  
[www.whittington.nhs.uk](http://www.whittington.nhs.uk)

Date published: 03/11/2020  
Review date: 04/07/2021  
Ref: CYP/Audiol/SBBCF&M/02-Turk

© Whittington Health  
Please recycle

**NHS**

**Whittington Health**  
NHS Trust



## Yumuşak kafa bantının takılması ve bakımı

### Hasta rehberi


(Soft band bone conduction fitting and  
maintenance - Turkish)



Yumuşak bant, Oticon, ses işlemcisi, teli ve işitme cihazı için plastik bağlaçla, ayarlanabilir elastik banttandır.



Bağlantı diskisi

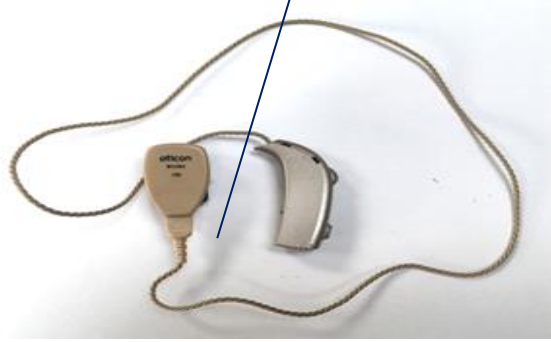

İşitme cihazı

### Yumuşak bant nasıl takılır?

1. Çocuğun kafasına uyacak şekilde uzunluğu ayarlayın. Bir rahatsızlığa neden olmaması için, çok sıkı olmadığından emin olun. İdeal olarak çocuğun kafası ile yumuşak bant arasında bir parmak sığacak kadar boşluk olmalıdır. İlk başta biraz gevşek olması, çok sıkı olmasından daha iyidir.

2. İşitme cihazının içine pil takarak ve pil kapısını kapatarak ses işlemcisini açın. Çocuğunuza kurcalatmayan pil kapağı olan bir işitme cihazı verilmişse lütfen odyolog tarafından gösterildiği gibi pil çekmecisinin kilitli olduğundan emin olun.

3. Bantı çocuğun kafasına takın. Bağlantı diskisi tercihen kulağın arkasına yerleştirilmelidir ancak duruma bağlı olarak başka bir yere de yerleştirilebilir. Bununla beraber rahatsızlığa neden olabileceğinden şakağın üstüne yerleştirmekten kaçının.

4. Islık çalmasını önlemek için, ses işlemcisinin kulağın kendisi de dahil olmak üzere hiçbir şeye dokunmadığından emin olun.

5. İşlemcinin çalıştığından ve çocuğun sizi duyduğundan emin olmak için çocukla konuşun. Eğer emin değilseniz, test çubuğundan veya yumuşak bantı kendiniz takarak dinleyin.

6. Çocuğun artık kemik iletimi ile duyması gerekir.

### Çocuğu yumuşak kafa bantına alıştırmak

Yumuşak bantı tanıtırken bu deneyimi olumlu bir hale getirmek önemlidir. Çocuğun başına başlangıçta 10-15 dakika takarak banta alıştırılması tavsiye edilir. Sonra – herhangi bir rahatsızlık belirtisi yoksa - yavaş yavaş kullanma süresini artırın. Bant rahatsızlık verirse, bağlantı diskisinin konumunu değiştirin. Sorun devam ederse, birkaç gün ara verin.

### Yumuşak bandın uzun süreli kullanımı

Bağlantı diskisinin aynı alana çok uzun süre baskısını önlemek için yumuşak bandın yerini düzenli olarak değiştirdiğinizden emin olun.